



## DRDI pour le code:101142 version A

### IFU URGO BOUTON DE FIEVRE - CEE

François BRUN le 30/09/2020 à 12:03

dernière modification par Ophélie BOLLOTTE le 01/10/2020 à 09:47

P\_DRDI

Dossier n° **61147C** suivi par **Patrick BATAILLE** pour le **24/04/2020**

Cat. Méthodes :Patrick BATAILLEPatrick BATAILLE

Statut:  En vérification  finie  archivable

en cours  à confirmer  archivée

Motif :  Innovation  Modification  Refonte  Roll Out

Code Projet : - - Version

Chef produit:	<b>Elodie DONDE</b>	Assistante:	François BRUN
Téléphone:		Téléphone:	
Centre de coût:	<b>LUHOPIOTHER</b>	Nature comptable:	<b>606300</b>
<b>Code to report on invoice</b>			
Unité:	<b>09 LU - Gd Public Pharmacie Export</b>	Secteur:	International
Secteur d'activité:	08 UH Export	Regroupement SA:	URGO HEALTHCARE
Nature:	<b>Notice Prospectus</b>	Pays:	<b>Pays de l'Est</b>
Site de production :	<b>Chevigny</b>	Code PF :	<b>600804</b>
Gamme Produit	<b>URGO</b>	Si vous ne trouvez pas la gamme qui convient, merci de demander sa création au service Packaging	
Panachage autorisé avec ancienne présentation			<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Date fin BAT souhaitée : ( proposée par coordinateur = )			<b>30/10/2020</b>
Produit avec AMM			<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
<b>Éléments nécessaires à la réalisation du B .A.T.</b>			
Annule et remplace un code article	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	Si oui lequel :	<b>424260</b>
Check-list			
Code à barres :	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non		
Motif de la modification :		<b>Ajout phrase GMED + autre phrase réglementaire manquante jusque -là</b>	

Textes (fichier Word attaché):

Langues sur AC : EN/TR/CS/SK/SL/PL/RO/BG/EL/LT/LV/EE

Valideurs : OPI (François Brun , Aurélie Reville ), Turquie, CS, SK, Slovénie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Pays Baltes

Autres AC de ce PF : BOX 101141, CARD 101140, LABEL 424257

Prendre FT idem 424260.

La phrase réglementaire de l'utilisation 6 mois après ouverture a été prise de l'AC 420546B pour les langues CS ,SK,SL,PL,RO et BG.

Pour le TR, EL, LT, LV, EE, le certificat de traduction , qui traitera également de la phrase GMED pour ces langues + SL, RO et BG, arrivera prochainement .



IFU 424260A3.pdf



TraductionsGMED - Copie.docx

Les champs en rouge sont obligatoires . Marquez votre document en <Privé> si vous n'avez pas tous les éléments .

**Calcul du retro-planning.**

Calcul à partir la date souhaité

Délai Circuit	6	Date fin maquette	22/10/2020
Délai Maquette	6	Date créa DRDI/FT	14/10/2020
Délai :DRDI	6	Date créa DT	06/10/2020

Date BAT révisée :

Date validée :

**Destinataires** => envoi à/aux destinataire(s) à l'enregistrement du document :

- c.vigneron-lodeiro@fr.urgo.com
- d.da-rol@fr.urgo.com
- m.thibaudin-vercruysse@fr.urgo.com
- o.bolotte@fr.urgo.com
- c.vigneron-lodeiro@fr.urgo.com
- d.da-rol@fr.urgo.com
- m.thibaudin-vercruysse@fr.urgo.com
- o.bolotte@fr.urgo.com

XX

FICHE TECHNIQUE de définition des IFU

<b>CODE DECOUPE URGO:</b>	<b>140-300-05</b>	<b>Nbre de Faces</b>	<b>16</b>
---------------------------	-------------------	----------------------	-----------

Désignation : IFU

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

	<u>A Plat</u>		<u>Plié</u>	
			Pli Croisé	Pli parallèle
				
	L	x	H	
<u>DIMENSIONS Format à plat</u>	<b>140</b>	x	<b>300</b>	
<u>DIMENSIONS Format plié</u>	<b>70</b>	x	<b>37,5</b>	
<u>Grammage du papier</u>	<b>50 grammes / m<sup>2</sup></b>			



**SPECIFICATION 1 : LOGISTIQUE**

Conditionnement de livraison : Barquettes dans carton

**SPECIFICATION 2 :**

**Représentation SCHEMATIQUE DE L'IFU**

Le code article doit être visible après pliage ( dans la mesure du possible )

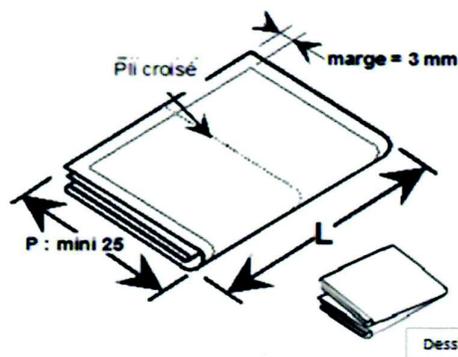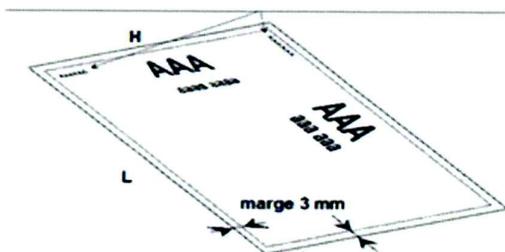

Dessin n°3

EDITION	DATE	AUTEUR	DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION
Ind A	06/06/2018	PAB	Création de la fiche générique tracé 140-300-04 en remplacement de la FT 50-49-01, 8 +1 plis.

#### URGO Cold sore

##### • Indikations

URGO Cold sore is indicated for the protection and treatment of injuries and symptoms of labial herpes blisters and should be used from the 1st symptoms (tingling, itching, burning sensations) until the cold sore disappears completely.

URGO Cold sore is a filmogel: it forms a treating film, discreet and insulating, efficient at all stages of the cold sore, which:

- Relieves tingling, itching, burning sensations
- Limits outbreak of the cold sore
- Limits the formation of vesicles and crusts
- Promotes healing
- Prevents contamination

##### • Instructions

For people under 16 years, it must be applied by an adult. Cover the cold sore with a thin layer of product using the disposable applicator. You may feel a temporary tingling or burning sensation after application. Let dry for about 1-2 minutes to allow the formation of the film. Drying time depends on the quantity of product applied. A transparent film is formed on your cold sore. Renew the application 2 to 4 times per day maximum, when the film covers no longer your cold sore. Continue treatment until complete healing. This filmogel can be used from the first symptoms (tingling, itching, burning sensation) to limit the outbreak of the cold sore. URGO Cold sore (Labial Herpes) has been designed for a practical, safe and hygienic application.

##### • Contra-indications

Do not apply in the following cases:

- On labial herpes blisters with a diameter bigger than 1 cm which need to seek medical advice.
  - In case of bacterial infection and/or risk of bacterial infection (impetigo)
  - In case of immunodepression (due to chronic illness and/or due to chemotherapy)
  - In case of atopic eczema during herpes outbreak
  - Do not use if you are allergic to any of the ingredients.
- Because of the absence of studies in pregnant women or nursing, the use of the product is not recommended.

##### • Precautions

Application on skin only. May sting transiently during application. Do not use in children under 6 years. Do not apply near eyes. Avoid any risk of contact with eyes. Irritating to eyes. Close tightly the bottle after use. After opening, it is advisable to use the product within 6 months. Do not reuse the applicator (single use). Do not swallow. Do not smoke during application, before complete drying of the product or near the open bottle. Flammable at liquid state. Keep out of reach of children. It is not necessary to remove the residual film before a new application. If necessary, the film can be removed by reapplying product and wiping immediately with a compress. Seek doctor's or pharmacist's advice in case of doubt or:

- if you have more than 6 herpes outbreaks in a year,
- if you notice no improvement after 7 days.

##### • Storage

Do not use after the expiry date printed on the packaging.

Keep away from open flame or spark, at a temperature lower than 40 °C.

##### • Composition

Cellulose derivative, mineral acid, carboxylic acid, vegetable oil, alcohol and water.

#### URGO Filmogel Uçuk

##### • Endikasyonlar

URGO Uçuk, herpes labialis adı verilen dudak uçuklarına karşı koruma ve semptomlarının tedavisinde etkilidir ve; kancaçlanma, kaşınma ve yanma hissi gibi ilk belirtilerin başlangıcından itibaren uçukları tamamen yok oluncaya kadar kullanılabilir.

URGO Uçuk, bir Filmogel ürünüdür: Uçuğun her evresinde etkili, şeffaf, uçucu izole eden ve tedavi edici bir film tabakası oluşturarak:

- Kancaçlanma, kaşınma ve yanma hissinin hafifletir.
- Uçuğun yayılmasını en aza indirir
- Kabarıkaların ve kabukların oluşmasını en aza indirir.
- İyileşmeyi hızlandırır.
- Bulaşmayı önler.

##### • Kullanma talimatı

16 yaşından küçüklere bir yetişkin tarafından uygulanmalıdır. Tek kullanımlık spatula yardımıyla ürünü ince bir tabaka halinde uçuğun üzerine sürünüz. Uygulama sonrasında geçici bir kancaçlanma, kaşınma veya yanma hissi duyabilirsiniz. Film tabakasının oluşması için 1-2 dakika bekleyiniz. Film tabakasının oluşma süresi, uygulanan ürün miktarına bağlıdır. Uçuğun üzerinde şeffaf bir film tabakası oluşur. Ürünü günde 2 ila en fazla 4 kere, film tabaka uçuğun üzerinde var olmadıkça sürekli uygulayabilirsiniz. Tedaviye, tam iyileşme sağlanana kadar devam ediniz. Bu filmogel, uçuğun ilk belirtilerinden (kancaçlanma, kaşınma, yanma hissi gibi) itibaren yayılmasını önler ve iyileşme sürecini hızlandırır. URGO Uçuk (Herpes Labialis) kullanışlı, güvenli ve hijyenik uygulama için tasarlanmıştır.

##### • Kullanılmaması gereken durumlar

Aşağıdaki durumlarda kullanılmayınız:

- Tıbbi yardım alınmaz gereken çapı 1cm'den daha büyük olan dudak uçuklarında.
  - Bakteriyel enfeksiyon ve/veya bakteriyel enfeksiyon riski (impetigo) durumunda.
  - İmmüno depresyon (kronik hastalıklar veya kemoterapi sonucu olarak) durumunda.
  - Herpesin ortaya çıkması durumunda atopik egzema var ise.
  - İçerdiği herhangi bir maddeye alerjiniz varsa kullanılmayınız.
- Hamile ya da emziren kadınlarda kullanılması ilgili yapılmış çalışmada bulunmadığından bu kişiler tarafından kullanılması önerilmez.

##### • Önlemler

Sadece deriyeye uygulanmalıdır. Uygulama sırasında kısa süreliğine batma hissi verebilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmayınız. Göz çevresine uygulanmayınız. Gözleyle temasından kaçınınız. Gözde zarar verir. Kullanıldıktan sonra kapak sıkıca kapatınız. Açıldıktan sonra ürünü en 6 ay içinde kullanılması tavsiye edilir. Spatula'yı tekrar kullanılmayınız (tek kullanımlıktır). Tutmayınız. Uygulama sırasında, film tam kurumadan ya da açık çişen kişi yanına sigara ile yaklaşılmayınız. Sniı haldeyken yanınızdr. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yeni uygulandıktan önce mevcut filmi kaldırmaya gerek yoktur. Gerekli olduğunda oluşmuş film tabakayı kaldırılmak için, ürünü kurumuş filmin üzerine bir damla damlatıp hemen kuru bir ped ile siliniz.

Aşağıdaki durumlarda veya şüphelenildiği durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız:

- Yıldız 6 defadan fazla uçucuğuz çıkıyorsa
- 7 günükü kullanılm sonrasında herhangi bir iyileşme görülüyorsa.

##### • Saklama koşulları

Ambalajda yazan son kullanma tarihindən sonra kullanılmayınız.

Alev ve ıvılcıklardan uzakta, 40 °C nin altında saklanmalıdır.

##### • Bileşimi

Selüloz türevi, mineral asit, karboksilik asit, bitkisel yağ, alkol ve su.

##### • İthalatçı:

Jade Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 16/10 Beşiktaş/İstanbul

#### URGO FILMOGEL Opary

##### • İndikace

URGO FILMOGEL Opary se používá na ochranu a ošetření poranění a oparů na rtěch a jejich příznaků. Je určen k použití od výskytu prvích příznaků (brnění, svědění a pálení) až do úplného vymizení oparu.

Jedná se o filmogel: vytváří ošetrující, nenápadný a ochranný film, který je účinný ve všech stádiích oparu:

- zmiňuje brnění, svědění a pálení
- omezuje růst oparu
- omezuje tvorbu pluzgřev a strupů
- podporuje hojení
- omezuje šíření infekce

##### • Návod k použití:

U osob mladších 16 let musí preparávek nanášet dospělá osoba. Pomocí jednorázového aplikátoru naneste tenkou vrstvu přípravku na opar. Je možné, že po aplikaci budete mít přechodný pocit svrbení nebo pálení. Nechte zaschnout přibližně 1 až 2 minuty. Doba zaschnutí závisí na aplikovaném množství přípravku. Na oparu se vytvoří průhledný film. Jakmile opar již není pokryt filmem, aplikaci znovu opakujte, nejvýše však 2x až 4x denně. Pokračujte v ošetřování až do úplného zhojení. URGO FILMOGEL Opary lze používat od prvích příznaků (brnění, svědění a pálení), k zabránění růstu oparu. Zdravotnický prostředek URGO FILMOGEL Opary byl vytvořený pro praktické, bezpečné a hygienické použití.

##### • Kontraindikace

Nepoužívejte v následujících případech:

- na opary o průměru větším než 1 cm, které vyžadují poradu s lékařem.
  - v případě bakteriální infekce nebo rizika bakteriální infekce (impetigo).
  - v případě snížené imunity (z důvodu chronického onemocnění a/nebo chemoterapie).
  - v případě atopického ekzému při oparu.
- Nepoužívejte v případě alergie na jakoukoliv složku přípravku. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici odpovídající hodnotící studie, nedoporučuje se použití přípravku u těhotných nebo kojících žen.

##### • Upozornění

Pouze ke kožnímu použití. Při nanášení může vyvolat přechodný pocit pálení. Nevhodné pro děti do 6 let. Nenášávejte v blízkosti očí. Zabraňte kontaktu s očima. Dráždí oči. Po aplikaci lahvičku pevně uzavřete. Po otevření se doporučuje produkt spotřebovat do 6 měsíců. Používejte aplikátor pouze jednou (jednorázové použití). Nepoužívejte. Některé během aplikace, před úplným zaschnutím filmu a v blízkosti otevřené lahvičky. Přípravěk je hořlavý v tekutém stavu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není nutné odstraňovat zbytek filmu před další aplikací. V případě potřeby je možné film odstranit nanesením nové vrstvy přípravku a okamžitým setřením záou. Poradte se s lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

- máte více než 6 oparů ročně
- nezaznamenáte žádné zlepšení ani po 7 dnech.

##### • Uchovávaní

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Chraňte před ohněm a jinými zdroji zápalení, při teplotě do 40 °C.

##### • Složení

Derivát celulózy, minerální kyselina, karboxylové kyseliny, rostlinný olej, alkohol a voda.

##### • Výhradní zastoupení pro ČR:

URGO Healthcare CZ s.r.o., Bolevecká 493, 109 00 Praha 10

#### URGO Filmogel na opary

##### • Účel určenia

URGO Filmogel na opary sa používa na ochranu a ošetroenie poranení a oparov (herpesov) na perách a ich príznakov. PriporoĎljivo je, da ga nanasete takoj (ako je štipanie, svrbenie a pocity pálenia) až do úplného vymiznutia oparu. URGO Filmogel na opary je gél, ktorý vytvára ošetrujúci, nenápadný a ochranný film, účinný vo všetkých štádiách oparu tým, že:

- Zmierňuje štipanie, svrbenie a pocity pálenia
- Bráni prepuknutiu oparu
- Bráni tvorbe pluzgierov a chrást
- Podporuje hojenie
- pospešuje celjenie
- Obmedzuje šírenie infekcie

##### • Pokyny na použitie

Deťom mladším ako 16 rokov musí prípravok aplikovať dospělá osoba. Pomocou jednorázového aplikátora naneste tenkú vrstvu prípravku na opar. Po aplikácii môžete dočasne pociťovať svrbenie alebo pálenie. Nanesenú vrstvu nechajte zaschnúť, bude to trvať približne 1 až 2 minúty. Doba schnutia závisí od aplikovaného množstva prípravku. Na opare sa vytvorí priehľadný film. Aplikáciu opakujte maximálne 2 až 4-krát denne, ak sa už film na opare nenachádza. Pokračujte v ošetrovaní až do úplného zahojenia.

Urto filmogel sa môže používať už pri prvých príznakoch (štipanie, svrbenie a pocity pálenia), aby sa zabránilo prepuknutiu oparu. Prípravok URGO Filmogel na opary bol vyvinutý na praktické, bezpečné a hygienické použitie.

##### •Kontraindikácie

Nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:

- na opary pier s priemerom väčším ako 1 cm, lebo tie si vyžadujú ošetroenie lekárom.
  - ak máte zníženú imunitu (v dôsledku chronického ochorenia a/alebo chemoterapie).
  - v prípade bakteriálnej infekcie a/alebo nožnej bakteriálnej infekcie (impetigo).
  - ak máte atopický ekzém v čase vzniku oparu.
- Nepoužívajte, ak ste alergický na ktorúkoľvek zo zložiek prípravku. Vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii zodpovedajúce hodnotiace štúdie, neodporúča sa používanie prípravku u tehotných alebo dojčiacich žien.

##### • Upozornenia

Len na kožné použitie. Pri nanášaní môže vyvolať prechodný pocit štipania. Nepoužívajte u detí do 6 rokov veku. Nepoužívajte v blízkosti očí. Zamedzte akémukoľvek kontaktu s očami. Dráždí oči. Po použití flastičku dôkladne uzavrite. Spotrebujte do 6 mesiacov po otvorení. Nepoužívejte aplikátor opakovane (jednorázové použitie). Neprehŕtajte. Neľafajte počas nanášania prípravku, a to ani pred jeho úplným zaschnutím, ani v blízkosti otvorenej flastičky. Hořlavé v tekutom stave. Uchovávejte mimo dosahu detí. Nie je nutné odstraňovať zvyšný film pred ďalšou aplikáciou. Ak je to potrebné, dá sa film odstrániť pri ďalšej aplikácii, následným okamžitým ošrením gázou. Poradte sa s lekárom alebo lekárníkom:

- ak máte viac ako 6 léžísk oparov za jeden rok
- ne zaznamenáte zlepšenie ani po 7 dňoch používania.

##### • Uchovávanie

Nepoužívajte tento prípravok po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávejte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov zápalenia, pri teplote nižšej ako 40 °C.

##### • Zloženie

Derivát celulózy, minerálna kyselina, karboxylové kyseliny, rastlinný olej, alkohol a voda.

##### • Výhradné zastúpenie pre SR:

URGO Healthcare CZ s.r.o., Bolevecká 493, 109 00 Praha 10, ČR

##### • Distribútor pre SR:

MagnaPharm SK s. r. o., Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, SR.

Dátum pridelenia CE značky: 2017 – Posledná revízia textu: 02-2020

#### URGO Herpes

##### • Indikacje

Urgo Filmogel proti herpesu se uporablja za zaščito in oskrbo poškodb in simptomov herpesa na ustnicah. PriporoĎljivo je, da ga nanasete takoj ob pojavu prvih znakov razvoja herpesa (ščemenje, srbenje, pekoč občutek) in nato u uporabo nadaljujete, vse doĎler herpes popolnoma ne izgine. Izdelek je po obliki filmogel in tvori diskreten zaščitni film, ki je učinkovit v vseh fazah razvoja herpesa, in:

- olajša ščemenje, srbenje, pekoč občutek
- omeji izbruh herpesa
- omeji nastanek mehurĉkov in krast
- pospešuje celjenje
- omeji širjenje okužbe

##### • Navodila za uporabo

Otrokom, mlajšim od 16 let, mora izdelek nanesti odrasla. S pomoĉjo aplikatorja za enkratno uporabo nanosite tanko plast filmogela na herpes. Morda boste začasno občutili ščemenje ali pekoč občutek. Pustite, da se susi 1-2 minuti in se oblikuje zaščitna plast. Čas sušenja je odvisen od koliĉine izdelka, ki ste ga naneli. Na herpesu se bo oblikoval prozoren zaščitni film. Nanos ponovite najveĉ 2- do 4-krat na dan, ko zašĉitni film veĉ ne prekriva herpesa. Nadaljujte z uporabo, dokler se herpes povsem ne zaceli. Izdelek lahko uporabljate že od prvih simptomov razvoja herpesa (ščemenje, srbenje, pekoč občutek). S tem boste omeili izbruh herpesa. Urgo filmogel proti herpesu zaradi svoje edinstvenega in praktičnega načina nanosa omogoča varno in higenično uporabo.

##### •Kontraindikacije

Izdelek ne uporabljajte:

- na herpesu na ustnicah s premerom, veĉjim od 1 cm, saj tak herpes potrebuje zdravniško oskrbo
  - pri bakterijski okužbi in/ali tveganju za bakterijsko okužbo (impetigo)
  - pri zmanjšanem imunskem odzivu (zaradi kronične bolezni in/ali kemoterapije)
  - pri atopiskem ekemu med izbruhom herpesa
- Če ste alergični na katero koli sestavino izdelka, izdelka ne uporabljajte. Študije pri nosečnicah in doječih materah niso bile narejene, zato uporaba izdelka pri teh dveh skupinah ni priporoĎljiva.

##### • Opozorila

Samo za znanje uporabo na ustnicah. Po nanosu se lahko pojavi prehodn pekoč občutek. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 let. Izdelek ne nanášajte v bližino oči. Izogibajte se stiku z očmi. Izdelek draži oči. Po vsaki uporabi stekleničko dobro zaprite. Potem ko izdelek odprete, je priporoĎljivo, da ga porabite v šestih mesecih. Uporabljenega aplikatorja ne uporabite ponovno (enkratna uporaba). Izdelek ne zaužijete. Med uporabo izdelka, oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi. Prav tako ne smete kaditi v bližini odprte stekleničke. Izdelek je v tekotem stanju vnetljiv. Shranjujete nedosegljivo otrokom. Ostanke filmogela pred novim nanosom ni treba odstraniti, sicer pa lahko filmogel odstranite tako, da ga ponovno nanesete in nato takoj obrišete z blazinico.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom:

- Če imate več kot 6 izbruhov herpesa na leto,
- Če po 7 dneh uporabe izdelka ne opazite izboljšanja.

##### • Shranjevanje

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži. Shranjujte loĉeno od odprtega plamena ali virov žruga ter pri temperaturi do 40 °C.

##### • Sestavine

Derivati celuloze, mineralna kislina, karboksilna kislina, rastlinsko olje, alkohol in voda.

##### • Distributer za SI:

Medis,d.o.o., Brniĉeva 1, Ljubljana

#### URGO Opryszczka

##### • Wskazania

URGO Opryszczka jest wskazywany w profilaktyce i leczenia opryszczki wargowej (Herpes labialis). Zaleca się stosowanie preparatu od pierwszych oznak opryszczki (takich jak mrowienie, swędzenie, pieczenie), aż do całkowitego jej ustąpienia.

URGO Opryszczka filmogel tworzy leczniczy, dyskretny i izolujący film, skuteczny we wszystkich fazach opryszczki, który:

- Łagodzi mrowienie, swędzenie, pieczenie
- Ogranicza wykwit opryszczki
- Ogranicza formowanie się pęcherzyków i strupów
- Przyspiesza gojenie
- Ogranicza zakażenie

##### • Sposób użycia

W przypadku osób poniżej 16. roku życia, produkt musi być aplikowany przez osobę dorosłą. Cienką warstwę preparatu należy zaaplikować na opryszczkę za pomocą spatulki jednorazowego użyciu dołączonej do opakowania. W trakcie aplikacji może pojawić się chwilowe uczucie mrowienia lub pieczenia. Na 1 - 2 minuty pozostaw do wyschnięcia. Czas potrzebny do wyschnięcia zależy od ilości nałożonego preparatu. Po aplikacji opryszczka zostanie pokryta przezroczystym filmem. Powtarzaj aplikację preparatu od 2 do maksymalnie 4 razy dziennie, jeżeli film nie pokrywa już opryszczki. Preparat należy stosować do całkowitego wyliczenia. W celu ograniczenia wykwitów opryszczki preparat należy aplikować od pierwszych oznak opryszczki (mrowienie, swędzenie, pieczenie). Preparat URGO Opryszczka został opracowany z myślą o praktycznej, bezpiecznej oraz higienicznej aplikacji.

##### • Przeciwwskazania

Nie stosować w poniższych przypadkach:

- gdy średnica opryszczki przekracza 1 cm - w takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem,
  - w przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia infekcji bakteryjnych, takich jak łzazec,
  - w przypadku immunodepresji (wynikającej z chorób przewlekłych i/lub chemioterapii),
  - w przypadku atopowego zapalenia skóry.
- Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników preparatu. Z uwagi na brak danych, nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

##### • Środki ostrożności

Preparat należy stosować wyłącznie na skórze. Podczas aplikacji może pojawić się uczucie pieczenia. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Nie stosować w okolicach oczu. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Działa drażniąco na oczy. Zamknąć szczelnie po użyciu. Produkt należy zżyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia. Aplikatory dołączone do opakowania należy stosować jednorazowo. Nie polykac. Palenie tytoniu w trakcie aplikacji, w czasie schnięcia preparatu lub w pobliżu otwartej butelki jest wzbronione. Substancja palna w stanie ciekłym. Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed kolejną aplikacją preparatu nie ma potrzeby usuwania poprzednio nałożonej warstwy. W razie konieczności ochronny film można usunąć poprzez aplikację niewielkiej ilości preparatu na istniejący film i natychmiastowe starcie warstwy suchym płatkiem. Zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wątpliwości lub:

- gdy opryszczka pojawia się częściej niż 6 razy w ciągu roku,
- braku poprawy w 7 dniach stosowania preparatu.

##### • Przechowywanie

Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. Przechowywać z dala od ognia i iskr, w temperaturze poniżej 40 °C.

##### • Skład

Pochodna celulozy, kwas nieorganiczny, kwas karboksylowy, olej roślinny, alkohol, woda.

##### • Dystrybutor:

Laboratoria Polska Łódź Sp. z o.o., Al. Jerolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Data wydania oznakowania CE: 2017 - Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02-2020

	Laboratoires URGO HEALTHCARE SERVICE PAO - Bâtiment 20 Belem 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France Tél.03 80 44 71 77 - E-mail <span> </span> : g.colas@fr.urgo.com
<i>DÉSIGNATION DE L'ARTICLE<span> </span>:</i>	
<b>IFU URGO BOUTON DE FIEVRE CEE - Recto</b>	
<i>CODE ARTICLE<span> </span>:</i>	<i>CODE PF<span> </span>:</i>
<b>101142</b>	<b>600804</b>
<i>Réf Tracé DECOUPE<span> </span>:</i>	<i>DIMENSIONS<span> </span>:</i>
140-300-05	300 x 140 mm Corps 06
<i>IMPRESSION 1 COULEUR<span> </span>:</i>	<i>DATE DE REALISATION<span> </span>:</i>
<b>300 U</b>	12/11/2020 <b>LYC 3</b>
	<i>DATE DE VALIDATION<span> </span>:</i>
<b>+ Découpe</b>	
<i>VISA CHEF PRODUIT<span> </span>:</i>	
<i>NOM<span> </span>:</i>	E. DONDE
<i>DATE<span> </span>:</i>	/11/2020

**CETTE ÉPREUVE COULEUR EST UTILISÉE UNIQUEMENT POUR LE POSITIONNEMENT DU TEXTE, CODE À BARRES ET ILLUSTRATION. THIS COLOR PRINT IS ONLY USED FOR THE TEXT, BARCODE AND PICTURE POSITIONNING.**

#### URGO anti herpes

##### Indicații

URGO Herpes este indicat pentru protecția și tratarea rănilor și simptomelor de vezicule herpetice labiale și trebuie folosit încă de la apariția primelor simptome (furnicături, mâncărimi, senzații de arsură) până când herpesul dispare complet.

URGO anti herpes este un filmogel: acesta formează o peliculă tratament, discretă și izolatoare, eficientă în toate stadiile herpesului, care:

- Amelorează senzațiile de furnicături, mâncărime și arsură
- Limitează erupția herpetică
- Limitează formarea de vezicule și cruste
- favorizează vindecarea
- Limitează contaminarea

##### Instrucțiuni

Pentru persoanele sub 16 ani, trebuie aplicat de către un adult. Acoperiți herpesul cu un strat subțire de produs folosind aplicatorul de unică folosință. Este posibil să simțiți furnicături și senzații de arsură temporare după aplicare. Lăsați-l să se usuce timp de 1-2 minute pentru a permite formarea peliculei. Timpul de uscare depinde de cantitatea de produs aplicat. Pe herpesul dumeavoastră se va forma o peliculă transparentă. Reaplicați aplicarea cel mult de 2-4 ori pe zi, când pelicula nu vă mai acoperă herpesul. Continuați tratamentul până la vindecarea completă. Acest filmogel poate fi folosit de la primele simptome (furnicături, mâncărimi, senzații de arsură) până la limita erupția herpetică. URGO anti herpes (Herpes labial) a fost conceput pentru a aplica practică, sigură și igienică.

##### Contraindicații

Nu aplicați în următoarele cazuri:

- Pe vezicule herpetice labiale cu un diametru de peste 1 cm care necesită sfatul medicului.
- În cazul unei infecții bacteriene și/sau al unui risc de infecție bacteriană (impetigo)
- În cazul imuno depresiei (din cauza unei boli cronice și/sau din cauza chimioterapiei)
- În cazul unei eczeme atopice în timpul erupției herpetice.
- Nu folosiți dacă sunteți alergic la oricare dintre ingrediente. Din cauza absenței studiilor la femei însărcinate sau care alăptează, nu se recomandă folosirea produsului de către acestea.

##### Precautii

Aplicați doar pe piele. Poate ustura temporar în cursul aplicării. A nu se utiliza la copii cu vârsta de sub 6 ani. A nu se aplica lângă ochi. Evitați orice risc de contact cu ochii. Intant pentru ochi. Închideți bine flaconul după utilizare. După deschidere, se recomandă să utilizați acest produs în decurs de 6 luni. Nu refolosiți aplicatorul (unică folosință). A nu se înghiți. Nu fumați în timpul aplicării, înainte de uscarea completă a produsului sau lângă flaconul deschis. Infamabil în stare lichidă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu este necesar să îndepărtați pelicula reziduală înainte de o nouă aplicare. Dacă este necesar, pelicula poate fi îndepărtată prin reaplicarea produsului și ștergerea imediată cu o compresă.

Cereți sfatul medicului sau farmacistului dacă aveți neajururi sau:

- Dacă aveți peste 6 furnicături pe an,
- Dacă nu observați nicio îmbunătățire după 7 zile.

##### Depozitare

A nu se folosi după data expirării tipărită pe ambalaj.

A se păstra departe de flăcări deschise sau scântei, la o temperatură de sub 40 °C.

##### Compoziție

Derivat din celuloză, acid mineral, acid carbonic, ulei vegetal, alcool și apă.

##### Distribuitor:

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL
Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2, din incinta Expo Business Park, etaj 7, Sector 1, București, Cod poștal 012095
Tel: +4 0372 502 200, Fax: +4 0372 502 255

#### URGO при херпес, филмогел

##### Показания

URGO при херпес, филмогел е течна лепенка, предназначена за защита и лечение на раничките и симтомите при поява на херпес по устните. Трябва да се използва още при поява на първите симптоми - щипене, сърбеж, парене - до пълното изчезване на херпеса.

URGO при херпес, филмогел: образува дискретен и изолиращ филм с лечебни свойства, ефикасен при всички стадии на развитие на херпеса, който:

- облекчава усещането за изтръпане, сърбеж и парене
- органичавва „избиването“ на херпеса
- органичавва нарастването на мехурчето и образуването на коринки
- подпомага оздравяването
- органичавва заразяването

##### Начин на приложение

При деца под 16 години, продуктът трябва да се прилага от възрастен. Нанесете върху чиста кожа необходимата доза върху мехурчето с помощта на aplicatora за еднократна употреба. Може да усетите леко щипене и парене, които бързо отминават. Изчакайте да изсъхне 1 или 2 минути, необходими за образуването на филм. Времето за изсъхване зависи от количеството нанесен продукт. Върху мехурчето се образува прозрачен филм. Продължавайте да нанасяте продукта върху херпеса: 2 до 4 пъти дневно, колкото е необходимо. Продължете с лечението до пълно оздравяване на херпеса. Този филмогел може да се използва дори при поява на първите симптоми - щипене, сърбеж, парене - до пълното изчезване на херпеса. Този продукт е създаден за практично, лесно и хигиенно приложение.

##### Противопоказания

Да не се прилага при следните случаи:

- върху херпесни ранички върху устните, чиито диаметър е над 1 cm и се нуждаят от мнението на лекар.
- в случаи на бактериална инфекция и/или риск от бактериална инфекция (импетиго).
- в случаи на имуна недостатъчност (дължаща се на хронично заболяване и/или химиотерпия).
- в случаи на atopична екзема.
- Да не се използва при алергии към някоя от съставките.
- Не се препоръчва употреба при бременни и кърмещи жени поради липса на проучвания.

##### Предупреждения

Само за външно приложение. След прилагане се появява щипене, което преминава бързо. Да не се използва при деца под 6 години. Да не се използва близо до очите. Избягвайте всякакъв риск от контакт с очите. Дръжте очите. Добре затваряйте флакона след употреба. Препоръчително е продуктът да се използва в рамките на 6 месеца след отваряне. Не използвайте aplicatora повторно, тъй е за еднократна употреба. Не поглъщайте. Не пушете по време на прилагане, преди продуктът да е изсъхнал напълно или в близост до отворения флакон. Лесно възпламеним, течен продукт. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не е необходимо, филмът може да бъде отстранен като се нанесе отново от продукта и се отстраня веднага с мляко. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт ако се съмнявате, че:

- Имате повече от 6 херпеса за една година.
- При липса на подобрение след повече от 7 дни.

##### Условия на съхранение

Да не се използва след срока на годност, посочен върху опаковката. Да се съхранява далеч от огън или източник на искри, при температура под 40 °C.

##### Състав

Целулозен дериват, минерална киселина, карбоксилсва киселина, растително олио, смрт и вода

##### Търговец на евро:

МагнаФарм България ЕАД, София 1271, бул. Рोजан 24, тел. 02/890 39 13

#### URGO Επεξεργασ Ερίπτας

##### Ενδείξεις:

Το URGO Cold sore ενδείκνυται για την προστασία και την θεραπεία των τραυμάτων και των ουμπιγμάτων των φιλκταιων του επεξευλο ερίπτα και πρέπει να χρησιμοποιείται από το πρώτο συμπτώματα (αισθηση μούδιασματoς, κνηρσοί και καψίματος) μέχρι η πλήρη να εξοφανοίτε τελείως.
Το URGO Cold sore είναι ένα υγρό επίθεμα τεχνολογίας filmogel: σχηματίζει ένα θεραπευτικό φιλμ, διακριτικό και προστατευτικό, αποτελεσματικό σε όλα τα στάδια της πλήρης, καθώς:
• Ανακουφίζει από την αισθηση του μούδιασματoς, του κνηρσοί και του καψίματος
• Περιορίζει την εξέλιξη της πλήρης
• Μειώνει τη δημιουργία κυστίδιων και κρούστας
• Προάγει την απούλιση - Περιορίζει τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης

##### Όδηγίες χρήσης:

- Σε παιδια κάτω των 16 ετών πρέπει να εφαρρογείται από ενήλικα.
- Καλύψτε την πλήρη με ένα λεπτο στρώμα με τη χρήση του διαθέσιμου εφαρρογέα. Μπορεί να αισθανθείτε ένα προσωρο μούδιασμα ή καψίμο μετά την εφαρρογή.
- Αφήστε να στεγνώσει για περίπου 1-2 λεπτά ώστε να σχηματιστεί το φιλμ. Ο χρόνος που χρειάζεται για να στεγνώσει εξαρτάται από την ποσότητα που έχει εφαρροστεί.
- Ένα διάφορο φιλμ σχηματίζεται πάνω στην πλήρη ος.
- Αναστέψτε την εφαρρογή 2 έως 4 φορές ημερο maximum, όταν το φιλμ δεν καλύπτει πλέον την πλήρη ος.
- Συνεχίστε την θεραπεία μέχρι να απουλίσει πλήρως η πλήρη.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πρώτο συμπτώματα (τσουχιο, φαγούρα, αισθηση καψίματος) για να περιορίσει την εκδήλωση του ερίπτα.
- Το URGO Cold sore (Επεξεργασ Ερίπτας) έχει σχεδιαστεί για να προσταξί, ασφαλή και υγιεινή εφαρρογή.

##### Αντενδείξεις:

Να μην εφαρρογείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Σε φιλκταιων επεξευλο ερίπτα με διάμετρο μεγαλύτερο από 1 εκ οι οποίες χριζούν κνηρσι ουμπουλις.
- Σε περίπτωση βακτηριολογίας λοίμωξης ή/και σε κίνδυνο βακτηριολογίας λοίμωξης (εξέμα)
- Σε περίπτωση ανοσοκαταστολής (λόγω χρόνιος ασθένειας ή/και λόγω χημειοθεραπείας)
- Σε περίπτωση ατοπικού εκζέματος κατά την εκδήλωση του ερίπτα.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά. Λόγω της απουσίας μελετών δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

##### Προφυλάξεις:

- Εφαρρογή μόνο στο δέρμα.
- Μπορεί να υπάρχει αισθηση τσιμπήματος παροδικά κατά τη διάρκεια εφαρρογής.
- Να μην χρησιμοποιείται σε παιδια κάτω των 6 ετών.
- Μην το εφαρρογείτε κοντά στα μάτια.
- Αποφύγετε την επαφή με το μάτι. Ερεθιστικό για το μάτι.
- Κλείστε σφικτά τη φιάλη μετά τη χρήση.
- Μια το άνοιγμα, συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 6 μηνών.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε τον εφαρρογέα (μιας χρήσης).
- Μην το καταπιείτε.
- Μην κολλίζετε κατά την εφαρρογή, πριν στεγνώσει τελείως το προϊόν ή κοντά στο ανοικτό φιαλίδιο.
- Εμφλεκτο σε υγρή κατάσταση.
- Κρατήστε το μακριά από παιδια.
- Δεν είναι απαραίτητο να απομακρυνθεί το απομείνω φιλμ πριν από μια νέα εφαρρογή.
- Έν είναι απαραίτητο, το φιλμ μπορεί να αφαιρεθεί με εφαρρογή εκ νέου προϊόντος και άμεσο σκούπισμα.
- Ανατρέξτε την αυθεντική ιστορή ή φαρμακοποσί σε περίπτωση αμφιβολής ή:
  - εάν έχετε επιπλοκα ερίπτα περισσότερο από 6 φορές το χρόνο,
  - εάν δεν παρατηρήσετε βελτίωση μετά από 7 ημέρες.

##### Ανοχή/ευσens:

- Μην το χρησιμοποιείτε μετά από την πρεαργονία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία.
- Να φυλάσσεται μακριά από φλόγα ή σπινθήρα, σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 40 °C.

##### Σύνθεση:

Παράγωγο κυτταρίνης, ανόργανο οξύ, καρβοξυλικό οξύ, φυτικό έλαιο, αλκοολή και νερό.

##### Ευλόγo:

Ευική Χημικών Προϊόντων Α.Ε. Αιγυός 60, Κηροσόι, 14564
Τηλ: 210 6203000

#### URGO Lūpu pūselīnei

##### Indikācijas

URGO Lūpu pūselīnei gēlis skirtas lūpu pūselīnes zāidzēdlii ir simptomu apsaugai bei jū gydymui. Jī reikia vartoti kai tik atsiranda pirmieji simptomi (peršējimas, niežējimo, deginimo jausmas) kai kol pūselīnei visīskai sīnkska.
Filmogel® URGO Lūpu pūselīnei suformuoja gydymaj, nepastebimaj ir izoliuojančj plevē, kuri yra veiksminga visose lūpu pūselīnei stadijose ir:
• sušvelnina peršējimas, niežējimo ir deginimo jausm;
• stabdo bērimo plītim;
• stabdo pūselīni ir šašū susidarymā;
• skatina gijim;
• saugo nuo uzkrētimo.

##### Vairotjimas

Jaunesniems nei 16 metū vaiksams naudoti tik su sauugsiu priēžiūra. Naudodami vienkartinj aplikatorij, plomu gelio sluoksniu padērikite pūselīnes pažeistj odā. Gāite jautsi laikina peršējimas arba deginimā. Leiskite gelij dzīvī 1–2 minutes, kad susidarytū plevē. Dzīvoimo laikas pīklausu nuo uzkrēpto gelio kiekio. Ant pūselīnes pažeistos odos susiformuoja permatoma plevē. Kai pažeistos odos vietas nebedzējim noūt, tegkite gelj dar kartā, daugiausia 2–4 kartus per parā. Tegskite gydymā lū visīskio īgijimo. Šj Filmogel® tehnoloģijas gelj galima pradēti vartoti atsiradus pirmiesiems simptomams (peršējimas, niežējimo, deginimo jausmai), kad bērimas nepilgtū. URGO Lūpu pūselīnei buvo sukurtas praktiskam, saugiam ir higieniskam vartojimui.

##### Kontraindikācijas

Navatokite, jeigu:

- lūpu pūselīni skersmoju ya dīdesnis negu 1 cm, nes dēļ jī reikia pasīkonsultoti su gydytoju;
- Jums yra bakterijos sukelta infekcija ir (arba) gali būti bakterijos sukelta infekcija (pūlinėlis);
- Jums yra imuno depresija (dėl lėtėnis lėgos ir (arba) chemoterapijos);
- īgiltūs pūselīnei pasireiskia atopinė egzema.
- Gelio nevartokite, jeigu este alergiskas kuriai nors sudedamajai daliai. Kadangi nėra tyrimū su nėšiomis arba žindančiomis moterimis, Šio gelio vartoti nerekomenduojama.

##### Atsargumo priemonės

Vartoti tik ant odos. Tepimo metu gali laikinai peršėti. Negalima vartoti vaikams jaunesniems nei 6 metų amžiaus. Negalima tepi aplink akis. Vengti patekimo į akis. Dirgina akis. Pavartojus buteliuką uždaryti. Atidarius rekomenduojama sunaudoti produktą per 6 mėnesius. Aplikatoriaus pakartotinai nenaudoti (jis yra vienkartinis). Nenuirytī. Nerūkyti tepimo metu, kol priemonė visīškai neišdžiūvo arba šalia atidaryto buteliuko. Skystos būsenos yra degus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tepant pakartotinai, plevėlis likučių pašalinti nebutina. Jeigu reikia, plevėlę galima pašalinti vėl užtepus gelio ir iškartū nuvalius kompresu. Pasīkonsultuokite su gydytoju arba vaistininku, jeigu Jums kilo abejonių arba:
– per metus pūselīnei Jums būna daugiau nei 6 kartus;
– po 7 dienu nera teigiamj rezultātū.

##### Laikymas

Ant pakuočes nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, gelio vartoti negalima. Laikyti atokiai nuo atviroo ugnies ir kibirkščių šaltinių. Laikyti žemesnėje kaip 40 °C temperatūroje.

##### Sudedamosios dalys

Celuliozes darinys, mineralinė rūgštis, karboksilo rūgštis, augalinis aliejus, alkoholis ir vanduo.

##### Platintojas:

UAB „Miečys“, Masūdikų g. 15, Sutūkainj, Sīaulių raj., LT-76104, tel. 8 800 12 345, www.miecy.lt

**CE 0459** Značka zhydy

	Pozī nāvod na pouzīvanie		Kōd dāvky
	Vyroba		Pouzīteľnē do

#### URGO Aukstum pumpām

##### Indikācijas

URGO Aukstum pumpām ir paredzēts lūpu herpes vīrusa jeb aukstum pumpu aizsardzībai un dzīdēšanai, un to var lietot līdz ar pirmo simptomu parādīšanos (kņudēšana, nieze, dedzināšanas sajūta), līdz aukstum pumpas pilnigai izzušanai.
Filmogel® URGO Lūpu pūselīnei suformuoja gydymaj, nepastebimaj ir izoliuojančj plevē, kuri yra veiksminga visose lūpu pūselīnei stadijose ir:
• sušvelnina peršējimas, niežējimo ir deginimo jausm;
• stabdo bērimo plītim;
• stabdo pūselīni ir šašū susidarymā;
• skatina gijim;
• saugo nuo uzkrētimo.

##### Lietošana

Bēriem, kas jaunāki par 16 gadiem, uzklāšanu jāveic pieaugušajam. Ar vienkāršojamo aplikatoru uzklājiet gelu plānā kārtiņā aukstum pumpai. Iespējams, pēc uzklāšanas sajūsit īslaicīgu kņudēšanas vai dedzināšanas sajūtu. Ļaujiet līdzeklim noūt apmēram 1-2 minūtes. Nožūšanas laiks ir atkarīgs no uzklātj līdzekļa daudzuma. Uz aukstum pumpas veidojas caurspīdīga plevīte. Uzklājiet gelu 2 līdz 4 reizes dienā, atkarībā no tā, cik ilgi aizsargplevīte noturas uz ādas. Turpiniet ārstēšanu līdz pilnigai sadzīšanai. Ieteicams gelu sākt lietot jau pie pirmajiem simptomiem (kņudāšana, nieze, dedzināšanas sajūta), lai ierobežotu aukstum pumpas veidošanos. URGO Aukstum pumpām lietošana aukstum pumpām ir praktiska, droša un higiēniska.

##### Kontraindikācijas

Nelietojiet preparātu:

- lūpu aukstum pumpām, kuru diametrs ir lielāks par 1 cm. Šādā gadījumā Jums ir jāvērsās pie ārsta;
- bakteriālas infekcijas gadījumā vai bakteriālas infekcijas riska gadījumā (impetigo);
- novājinātās imūnsistēmas gadījumā (hroniskas slimības, ķīmijterapija);
- atopiskas ekzēmas gadījumā vienlaicīgi ar aukstum pumpas veidošanos; Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu no preparāta sastāvdaļām. Sakarā ar atbilstošu pētījumu trūkumu, preparāta lietošana grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā nav ieteicama.

##### Bridinājumi

Lietot tikai uz ādas. Iespējama pārējosa dedzināšanas sajūta pēc uzklāšanas. Nelietot bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem. Neuzklāj acu zonā. Izvairīties no kontakta ar acīm. Kairinošs acīm. Pēc lietošanas rūpīgi atvērti flakonu. Produktu ieteicams iedzērt 6 mēnešu laikā pēc atvēšanas. Neizmetot aplikatoru atkārtoti (aplikatori ir vienkāršojami). Nenort. Nesmēķēt uzklāšanas laikā, pirms preparāta pilnīgas nožūšanas vai atvērtā flakona tuvumā. Preparāts šķīdās veidā ir viegli uzšļēmojoss. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pirms atkārtotas uzklāšanas nav nepieciešams noņemt plevītes atlikus. Ja nepieciešams preparātu noņemt, uzklājiet vēlreiz gelu un tūlīt to noslaukiet ar salveti. Konsultāties ar ārstu vai farmaceitu šaubu gadījumā vai, ja:
– gada laikā parādās vairāk kā 6 aukstum pumpas,
– pēc septiņu dienu lietošanas nav redzamu pāmājiu.

##### Uzglabāšana

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas redzams uz iepakojuma. Uzglabāt drošā atālmū no liesmām vai aizdegšanās avota, līdz +40 °C temperatūrai.

##### Sastāvs

Ēdūztes derīvatš, minerālskābe, karboksīlskābe, augu eļļa, spirts un ūdens.

##### Izplatītājs:

SlA "G.Miečys Arsts" Mūkuskas iela 51, Rīga L. 80009900, www.miecy.lv

#### URGO geel ohatisele

##### Nāidustused

URGO geel ohatisele kasutatakse huuleohatise raviks. Preparāti tuleks kasutada ohatise esimeste sümptomite (kõhelus, sügelus, kipitus) ilmnenemist kuni täieliku paranemiseni. Tänu Filmogel® tehnoloogiale moodustub ohatisele raviv, diskreetne ja isoleeriv kile, mis on efektiivne ohatise kõigis staadiumites:
• Leevendab kõhelust, sügelust ja kipitust • Peatab ohatise leviku
• Takistab villide ja koorikutete teket • Soodustab paranemist • Piirab viiruse edasikandumist.

##### Kasutamine

Alla 16-aastastel lastel peab geeli peale kandma täiskasvanu. Ühekordselt kasutatava aplikatori abil kanda geel õhukes kihina ohatisele. Geeli pealekandmise kohal võib esineda ajutist kipitus- või põletustunnet. Lasta preparaadil 1 kuni 2 minutit kuivada. Kuivamisega softud kasutatud geeli kogused. Ohatisele moodustub läbipaistev kile. Ravi jätkamiseks kasutada geeli sõltuvalt kile püsimisest ohatisel (maksimaalselt 2 kuni 4 korda päevas). Geeli kasutada kuni ohatise täieliku paranemiseni. Villide tekke vältimiseks kasutada preparaati ohatise esimeste sümptomite (kõhelus, sügelus, kipitus) ilmnemisel. URGO geel ohatisele on loodud praktiliseks, ohutuks ja hügieeniliseks kasutamiseks.

##### Vastuäidustused

- Preparaati mitte kasutada järgnevate juhtude:
•Huuleohatis, mille diameeter on suurem kui 1 cm. Sellisel juhul konsulteerida arstiga.
- Bakteriaalne infektsioon ja/või selle risk (mädivil-õõve).
- Koonilised haigused ja/või meteraapiast nõrgestatud immuunsüsteem.
- Atoopilise dermaiditi samaaegne esinemine.
- Preparaati mitte kasutada alergia korral mõne koostisosa suhtes. Raseduse ja imetamise ajal ei ole soovitatav kasutada, kuna puuduvad uuringud.

##### Ettevaatusabinõud

Kasutada ainult nahal. Geeli pealekandmisel võib esineda mööduvat kipitustunnet. Mitte kasutada alla 6-aastastel lastel. Mitte kasutada silmade ümbruses. Vältida kokkupuudet silmadega. Toode on silmadele ärritava toimega. Pärast kasutamist sulgeda pudel korralikult. Soovitav on preparaat ära kasutada 6 kuu jooksul pärast esmast avamist. Mitte kasutada aplikatoreid korduvalt, need on ühekordselt kasutamiseks. Vältida preparaadi allaneelamist. Mitte suitsutada toote pealekandmisel, enne kile täielikku kuivamist või avatud pudel läheduses. Vedelal kujul tuleb hõlida. Hoida laste eest varjatud ja kättesamatus kohas. Ohatisele moodustunud kilet ei pea eemaldama enne uue kihil peale kandmist. Vajaduse korral saab moodustunud kilet eemaldada, kui kanda geel uuesti ohatisele ning koheselt ära puhkida. Kõsimites korral või järgmistel juhtudel pidaada nõu arsti või apteekiga:
– kui ohatis esineb enam kui kuuel korral aastas,
– kui sümptomid ei leevendu 7 päeva jooksul.

##### Säilitamine

Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Hoida eemal lahtisest tuest ja sädemetest. Säilitada temperatuuril alla 40 °C.

##### Koostis

Iseluloodesderiivaat, mineraalhape, karboksüühape, taimeõli, alkohol ja vesi.

##### Maaletoetaja

Miečys-Pharm OÜ, Vitamiini 6a, 50412 Tartu. Tel: 738 0676. www.miecy.ee

<div style="text-align: center;"><small>LABORATOIRES</small> <b>URGO</b> <small>HEALTHCARE</small></div>	<div style="text-align: center;"><small>Laboratoires URGO HEALTHCARE</small> SERVICE PAO - Bâtiment 20 Belem 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France Tél. 03 80 44 71 77 - E-mail : g.colas@fr.urgo.com</div>		
<i>DÉSIGNATION DE L'ARTICLE :</i>			
<b>IFU URGO BOUTON DE FIEVRE CEE - Verso</b>			
<i>CODE ARTICLE :</i>	<i>CODE PF :</i>		
<b>101142</b>	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">VERSION</td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>A</b></td></tr></table> <b>600804</b>	VERSION	<b>A</b>
VERSION			
<b>A</b>			
<i>Réf Tracé DECOUPE :</i>	<i>DIMENSIONS :</i>		
<b>140-300-05</b>	<b>300 x 140 mm</b> Corps 06		
<i>IMPRESSION 1 COULEUR :</i>	<i>DATE DE REALISATION :</i>		
<div style="text-align: center;"><span style="color: blue;">■</span> <b>300 U</b></div>	<b>12/11/2020</b> <b>LYC 3</b>		
	<i>DATE DE VALIDATION :</i>		
<b>+ Découpe</b>			
<i>VISA CHEF PRODUIT :</i>			
<i>NOM :</i>	<b>E. DONDE</b>		
<i>DATE :</i>	<b>/11/2020</b>		

**CETTE ÉPREUVE COULEUR EST UTILISÉE UNIQUEMENT POUR LE POSITIONNEMENT DU TEXTE, CODE À BARRES ET ILLUSTRATION. THIS COLOR PRINT IS ONLY USED FOR THE TEXT, BARCODE AND PICTURE POSITIONNING.**