



Tekočina za odstranjevanje bradavic

A. Za kaj in kdo lahko uporabljaj Wortie® Liquid?

Wortie® Liquid, pripomoček za odstranjevanje bradavic na rokah ali nogah, je na voljo brez recepta. Wortie® Liquid je primeren za odrasle in otroke, starejše od 4 let.

B. Ozadje nastanka bradavic

Navadne bradavice so majhni izrastki, ki jih povzroča humani papiloma virus (HPV), ki je zelo nalezljiv, in se lahko prenaša z ene osebe na drugo ali z enega mesta na telesu na drugo, z neposrednim stikom z okuženim področjem. Bradavice se pogosto razvijejo na prstih ali na hrbtni strani dlani, kolenskih in komolčnih. Prepoznate jih po grobem, 'cvetastem' izgledu na površini.

Bradavice na stopalih se pojavljajo le na podplatih ali pod prsti nog. Običajno so boleče in so videti kot majhen bel obroč na koži, s črnimi pikami v sredini. Te bradavice so prav tako nalezljive in se lahko prenašajo na drugo osebo s stikom z mokro površino, npr. tlemi.

Navadne bradavice in bradavice na stopalih se tradicionalno odstranjujejo na dva načina. Prvi način je s kislimi tekočinami kot je Wortie® Liquid, ki delujejo tako, da bradavico razgradijo. Drugi način vključuje fizično odstranitev bradavice z laserjem ali zamrzovanjem.

C. Zakaj je Wortie® Liquid drugačen?

Wortie® Liquid je zasnovan na podlagi znanstvenih dognanj in ima edinstveno kombinacijo sestavin, ki omogočajo, da je formulacija pripomočka manj agresivna za učinkovito odstranitev bradavic. Ta formulacija se na koži hitro posuši in tako ne pušča madežev, zelo natančen aplikator pa preprečuje poškodbo zdrave okolne kože. Prozoren obliž po nanosu tekočine prekriva bradavico in zagotovi, da bo tekočina ostala na mestu in istočasno zaščiti bradavico.

D. Kako Wortie® Liquid deluje?

GTA tehnologija (tehnologija glikolne kisline + trikloroacetne kisline + alkohola):

Ta tehnologija je za Wortie® Liquid edinstvena in je zasnovana na najnovejših znanstvenih dognanjih o bradavicah. Je inovacija, ki jo je razvila skupina zdravstvenih strokovnjakov, in omogoča zelo hitro uporabo.

• Učinkovita in bolj varna mešanica sestavin

Wortie® Liquid formulacija je zasnovana na mešanici dobro poznanih kislin, ki se uporabljajo za odstranjevanje bradavic. Kombinacija teh sestavin omogoča, da je formulacija pripomočka za učinkovito odstranitev bradavic manj agresivna.

Wortie® Liquid formulacija ima dvojno delovanje:

- Lušči vrhne plasti, ki tvorijo zadebeljen del bradavice. To zmehča zatrdelo kožo in tako omogoči

odstranitev bradavice (aktivna sestavina: glikolna kislina)

- Globoko luščenje tkiva, ki tvori bradavico (aktivna sestavina: trikloroacetna kislina).

E. Hiter in natančen


Wortie® Liquid se posuši v približno 30 sekundah in s tem pomaga preprečiti madeže in draženje. Natančen aplikator preprečuje poškodbo zdrave okolne kože.

• Prozorni obliži za zaščito

Wortie® Liquid ima dodane obliže za zaščito področja po nanosu pripomočka. Obliži omogočajo daljšo izpostavljenost aktivnim sestavinam. Poleg tega delujejo kot zaščitna plast, ki ohranja področje čisto, ščiti pred dotikanjem, skriva bradavico, da se izognete zadregi, in zmanjša možnost prenosa virusa bradavice na druge.

F. Kako uporabite Wortie® Liquid?

Pripradeto področje umijte s toplo vodo in milom. Pred nanosom izdelka se prepričajte, da je koža suha.

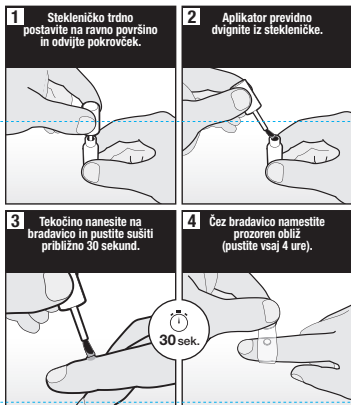

Wortie® Liquid stekleničko postavite na ravno površino (npr. umivalnik), da se izognete politju.

- S pomočjo Wortie® Liquid aplikatorja natančno nanesite tanko plast tekočine na bradavico. Pazite, da tekočine ne nanesete na zdravo okolno kožo. Če se to kljub temu zgodi, obrišite odvečno tekočino z robčkom, oziroma če je potrebno, umijte področje z vodo in milom. Nato pripomoček previdno ponovno nanesite.
- Počakajte, da se tekočina posuši (približno 30 sekund).
- Ko je področje nanosa povsem suho, namestite na bradavico obliž.
- Obliž pustite na mestu vsaj 4 ure ali dokler ne odpade. Če je obliž po 24 urah še vedno na bradavici, ga previdno odstranite in umijte področje s toplo vodo in milom.
- Pripomoček nanašajte 2-krat na teden kot je opisano zgoraj dokler bradavica ne izgine.

Čas, da bradavica izgine je v veliki meri odvisen od velikosti bradavice. Nekatere bradavice izginejo po enem tednu uporabe pripomočka, medtem ko je za večje bradavice potrebno več časa, do 8 tednov.

Pomembno je, da se natančno držite navodil za uporabo pripomočka. Nepravilna uporaba lahko povzroči pekoč občutek ali draženje zdrave kože in povzroči trajno poškodbo zgornje plasti kože.

uključuje fizično uklanjanje bradavice laserom ali z mrzovanjem.

C. Zašto je Wortie® Liquid drukčiji?

Wortie® Liquid zasnovan je na temelju objavljenih znanstvenih podataka i ima jedinstvenu kombinaciju sastojaka koji omogućuju da njegova formulacija bude manje agresivna za učinkovito uklanjanje bradavica. Ta se formulacija na koži brzo suši i ne ostavlja mrlje, a vrlo precizan aplikator sprječava oštećenje zdrave okolne kože. Nakon nanošenja tekućine proziran flaster prekriva bradavicu i omogućuje da tekućina ostane na mjestu i istodobno zaštići bradavicu.

D. Kako djeluje Wortie® Liquid?

Tehnologija GTA (tehnologija glikolne kiseline + trikloroacetne kiseline + alkohola):

Ta je tehnologija jedinstvena za Wortie® Liquid i zasnovana na najnovijim znanstvenim dostignućima o bradavicama. To je inovacija koju je razvila skupina zdravstvenih stručnjaka i omogućuje vrlo brzu upotrebu.

• Učinkovita i sigurnija mješavina sastojaka

Formulacija medicinskog proizvoda Wortie® Liquid zasnovana je na mješavini dobro poznatih kiselina koje se upotrebljavaju za uklanjanje bradavica. Kombinacija tih sastojaka omogućuje formulaciji medicinskog proizvoda da bude manje agresivna pri učinkovito uklanjanju bradavica.

Formulacija medicinskog proizvoda Wortie® Liquid ima dvostruko djelovanje:

- Ljušti gornje slojeve koji čine zadebljani dio bradavice. To omekšava tvrdu kožu i tako omogućuje uklanjanje bradavice (djelatna tvar: glikolna kislina).
- Duboko ljuštenje tkiva koje čini bradavicu (djelatna tvar: trikloroacetna kislina).

G. Opozorila

- Uporabite samo skladno z navodili za uporabu.
- Tekočino nanesite samo na bradavico.
- Bodite posebno pozorni, da pripomočka ne nanašate na zdravo okolno kožo.
- Ne nanašajte na področja s tanko ali občutljivo kožo, kot so obraz, pazduhe, prsi, zadnjica ali genitalno področje. Uporaba na teh področjih lahko povzroči draženje in/ili brazgotinjenje.
- Ne uporabljajte pripomočka, če bradavice ne vidite jasno ali naj vam neko pomaga z nanosom.
- Ne uporabljajte pripomočka, če ste preobčutljivi na katerokoli izmed sestavin.
- Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 4 let.
- Ne uporabljajte na razdraženi koži ali na kateremkoli področju, ki je okuženo, pordelo ali kaže znake vnetja kot sta srbenje ali otekanje. Nanos pripomočka na ta področja lahko povzroči poslabšanje stanja, ki morda ni bradavica in ga mora pregledati zdravnik.
- Če s pripomočkom oskrbujete kožno spremembo, ki ni bradavica, se lahko čas zdravljenja podaljša. Stanje vaše kože se lahko resno poslabša ali vodi do bolezn.
- Ne uporabljajte na pecljatih kožnih izrastkih, pegah, materinih znamenjih, bradavicah, iz katerih rastejo dlake, genitalnih bradavicah (na penisu ali vaginalnem področju) ali na bradavicah na obrazu ali sluznici (npr. v ustih, nosu, anusu, genitalijah, ušesih, ušesih ali v bližini oči). Uporaba na teh področjih lahko povzroči opekline ali trajno brazgotinjenje kože ali vodi do slepote, če pride v oči.
- Obližev ne uporabite ponovno.
- Pripomočka ne uporabite, če informacij na steklenički in navodilu za uporabo ne vidite jasno.
- Ne nanašajte pripomočka skupaj z drugimi metodami odstranjevanja bradavic, ker ni jasno, kako bo kombinacija vplivala na vašo kožo.
- Pripomočka ne uporabite, če ste noseči, dojite, imate sladkorno bolezen ali slabo prekrvavitve.
- Izogibajte se stiku z očmi. Če ste pripomoček nanesli na roke, z njimi ne drgnite ali se dotikajte oči. Pri stiku z očmi izpirajte z vodo 15 minut in takoj poišcite zdravniško pomoč.
- Pripomočka ne zaužijte. Vsečina je strupena in lahko povzroči resno notranjo poškodbo. V primeru zaužitja poišcite zdravniško pomoč ali pokličite Center za zastrupitve.
- Samo za zunanjo uporabo. Če pripomočka ne uporabljate skladno z navodili ali ga pomotoma nanesete neposredno na kožo ali stanje, ki ni bradavica, lahko povzroči draženje in brazgotinjenje kože.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom. Otroci ne razumejo navodil, kako pravilno uporabljati ta izdelek. Vsečina je ob zaužitju ali uporabi na drugih delih telesa kot bradavice, nevarna. Nevarnost zadušitve – vsebuje majhne delce.
- Vnetljivo. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi, ločeno od virov toplote.

H. Previdnostni ukrepi

- Glikolna kislina in trikloroacetna kislina sta jedki kislini. Pripomoček nanašajte samo na bradavico, izogibajte se zdravi okolni koži.
- Po nanosu se izogibajte izpostavljanju oskrbovanega področja UV svetlobi ali neposredni sončni svetlobi, da se izognete draženju ali hiperpigmentaciji. Uporaba obliža vam pomaga pri zaščiti pred neposredno sončno svetlobo.

E. Brz i precizan


Wortie® Liquid suši se za približno 30 sekundi i tako pomaže sprječiti mrlje i nadraživanje. Precizan aplikator sprječava oštećenje zdrave okolne kože.

• Prozirni flasteri za zaštitu

Wortie® Liquid sadrži flastere za zaštitu područja nakon aplikacije medicinskog proizvoda. Flasteri omogućuju dulju izloženost djelatnim tvarima. Osim toga djeluju kao zaštitni sloj koji održava područje čistim, štiti od dodira, prekriva bradavicu da izbjegnute nelagodnu i smanjuje mogućnost prijenosa virusa bradavice na druge osobe.

F. Kako se upotrebljava Wortie® Liquid?

Područje operite toplom vodom i sapunom. Prije nanošenja proizvoda koža mora biti suha.

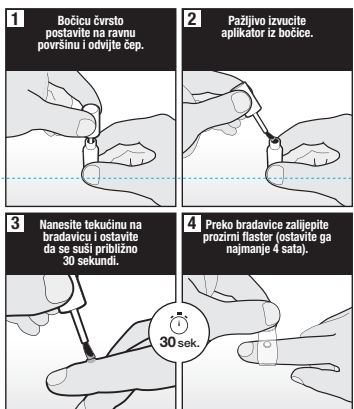

- Wortie® Liquid lahko poškoduje vaše imetje, če pride v stik z oblačili, nakitom, pohištvom ali tlemi.
- V primeru vnetja ali močnejše bolečine in rdečine po nanosu, prekinite z uporabo izdelka, previdno umijte področje z vodo in milom, da odstranite izdelek s kože ter se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Če opazite, da rdečina ali draženje vztrajata po enem ali več nanosov, prenehajte z uporabo pripomočka in se posvetujte z zdravnikom.
- Če nanesete preveč tekočine, lahko povzroči draženje.
- Posebno previdni bodite, če pripomoček nanašate na suho kožo.
- Wortie® Liquid mora otroku (4+) nanesti odrasla oseba.
- Posvetujte se z zdravnikom, če po 3 mesecih redne uporabe ne opazite izboljšanja.
- Izdelek naj uporabljaja le ena oseba, s tem se vzdržuje optimalna osebna higiena.

I. Možni neželeni učinki

Kot vsi drugi odstranjevalci bradavic, ima tudi Wortie® Liquid lahko neželene učinke, čeprav se ne pojavijo pri vseh uporabnikih:

- Med delovanjem raztopine boste lahko občutili rahlo zbadajoč ali pekoč občutek in/ali blago občutljivo oskrbovanega področja. To je običajno prehodno; v redkih primerih se lahko na koži pojavijo madeži (temna ali rdeča koža).
- Prenehajte z uporabo izdelka in takoj obvestite vašega zdravnika ali farmacevta, če se ti učinki poslabšajo ali se izrazi nepričakovano nelagodje.
- Zaščitite oskrbovano področje pred neposredno UV svetlobo in soncem, da se izognete draženju ali hiperpigmentaciji. Uporaba obliža vam pomaga pri zaščiti pred neposredno sončno svetlobo.

J. Nadaljevanje zdravljenja

- Oskrbovano področje ohranjajte čisto.
- Med uporabo pripomočka lahko plavate ali se prhate.
- Oskrbovanega področja ne praskajte, ker lahko pride do okužbe.
- Izogibajte se soncu.

Vsebina pakiranja Wortie® Liquid

- Steklenička, napolnjena s 5 ml tekočine. Količina tekočine je zadostna za 18 nanosov, kar pokrije celoten čas oskrbe.
- 18 brezbarvnih obližev za enkratno uporabo za prekritje in zaščito bradavice po nanosu tekočine.

To navodilo za uporabo vsebuje informacije o delovanju pripomočka kot tudi opozorila in omejitve pri uporabi.

Sestavine: denaturiran alkohol, glikolna kislina, trikloroacetna kislina

0481

Datum revizije navodila: julij 2018.

Izdelek lahko uporabljate do konca roka uporabe, označenega na škatli.

Izdelovalec:	Distributer:
YouMedical B.V. Barbara Strozziilaan 201 1083 HN Amsterdam Nizozemska	Medis, d.o.o. Brničeva 1, Ljubljana

- Uz pomoć aplikatora Wortie® Liquid precizno nanesite tanko sloj tekućine na bradavicu. Pazite da tekućinu ne nanesete na zdravu okolnu kožu. Ako se to ipak dogodi, obrišite suvišnu tekućinu maramicom ili operite područje vodom i sapunom ako bude potrebno. Zatim pažljivo ponovno nanesite medicinski proizvod.
 - Pričekajte da se tekućina osuši (približno 30 sekundi).
 - Kad područje aplikacije bude posve suho, na bradavicu nalijepite flaster.
 - Ostavite flaster barem 4 sata ili dok sam ne otpadne. Ako je flaster nakon 24 sata još uvijek na bradavici, oprezno ga skinite te operite područje toplom vodom i sapunom.
 - Medicinski proizvod nanesite dvaput tjedno kako je gore opisano kod bradavica ne nestane.
- Vrijeme do nestanka bradavice uvelike ovisi o veličini bradavice. Neke bradavice nestaju nakon tjedan dana upotrebe medicinskog proizvoda, a za veće bradavice treba više vremena, do 8 tjedana.

Važno je da se točno pridržavate upute za upotrebu medicinskog proizvoda. Nepravilna upotreba može izazvati osjećaj pečenja ili draženje zdrave kože i proizući trajno oštećenje gornjeg sloja kože.

G. Upozorenja

- Upotrebljavajte samo skladno uputi za upotrebu.
- Tekućinu nanesite samo na bradavicu.
- Posebno pazite da medicinski proizvod ne nanesite na zdravu okolnu kožu.
- Ne nanesite na područja s tankom ili osjetljivom kožom poput lica, pazuha, prsiju, stražnjice ili na genitalno područje. Upotreba na tim područjima može izazvati draženje i/ili ožiljke.
- Ne upotrebljavajte medicinski proizvod ako bradavicu ne vidite jasno ili neka vam ga netko pomogne nanijeti.



Tekućina za uklanjanje bradavica

A. Za što se upotrebljava Wortie® Liquid i tko ga može upotrebljavati?

Wortie® Liquid, sredstvo za uklanjanje bradavica na rukama ili nogama, dostupno je bez recepta. Wortie® Liquid primjeren je za odrasle i djecu stariju od 4 godine.

B. Kako nastaju bradavice

Obične bradavice male su izrasline što ih uzrokuje humani papiloma virus (HPV), koji je jako zarazan i može se prenositi s jedne osobe na drugu ili s jednog mjesta na tijelu na drugo putem neposrednog kontakta sa zaraženim područjem. Bradavice se često razvijaju na prstima ili na vanjskoj strani dlana, na koljenima i laktovima. Prepoznate ćete ih po grubom izgledu na površini (poput cvjetaca).

Bradavice na stopalima javljaju se samo na tabanima ili pod prstima nogu. Obično su bolne i izgledaju poput bijelog prstena na koži, s crnim točkama u sredini. Te su bradavice također zarazne i mogu se prenijeti na drugu osobu kontaktom s mokrom površinom, npr. podom.

Obične bradavice i bradavice na stopalima tradicionalno se uklanjaju na dva načina. Prvi način je pomoću kiselih tekućina kao što je Wortie® Liquid koje djeluju tako da razgrađuju bradavicu. Drugi način

- Ne upotrebljavajte medicinski proizvod ako ste preosjetljivi na bilo koji njegov sastojak.
- Ne upotrebljavajte kod djece mlađe od 4 godine.
- Ne upotrebljavajte na razdraženoj koži ili na bilo kojem području koje je razraženo, pocrvenjelo ili pokazuje znakove upale poput svrbeža ili oticanja. Nanos medicinskog proizvoda na ta područja može izazvati pogoršanje kožne promjene koja možda nije bradavica i mora je pregledati liječnik.
- Ako medicinski proizvod nanosite na kožnu promjenu koja nije bradavica, trajanje liječenja može se produžiti. Stanje vaše kože može se ozbiljno pogoršati ili voditi do bolesti.
- Ne upotrebljavajte na duguljastim kožnim izraslinama, pjegama, madežima, bradavicama iz kojih rastu dlake, genitalnim bradavicama (na penisu ili vaginalnom području) ili na bradavicama na licu ili sluznici (npr. u ustima, nosu, anusu, genitalijama, usnama, ušima ili blizu očiju). Upotreba na tim područjima može izazvati opekline ili trajne ožiljke na koži, odnosno može prouzročiti sljepoću ako uđe u oči.
- Flastere ne smijete ponovno upotrebljavati.
- Medicinski proizvod ne smijete upotrebljavati ako ne vidite jasno informacije na bočici i u uputi za upotrebu.
- Ne nanosite medicinski proizvod zajedno s drugim metodama uklanjanja bradavica jer nije jasno kako će kombinacija utjecati na vašu kožu.
- Medicinski proizvod ne smijete upotrebljavati ako ste trudni, dojite, imate šećernu bolest ili lošu prokrvljenost.
- Izbjegavajte kontakt s očima. Ako ste medicinski proizvod nanijeli na ruke, nemojte njima trljati ili dirati oči. Pri kontaktu s očima ispirite oči vodom 15 minuta i odmah potražite liječničku pomoć.



Wortie
liquid

Tečnost za uklanjanje bradavica

A. Za šta se upotrebljava Wortie® Liquid i ko ga može upotrebljavati?

Wortie® Liquid, sredstvo za uklanjanje bradavica sa ruku ili nogu, dostupno je bez recepta. Wortie® Liquid namenjen je za odrasle i decu stariju od 4 godine.

B. Kako nastaju bradavice

Obične bradavice su male izrasline koje prouzrokuje humani papiloma virus (HPV), koji je jako zarazan i može se prenositi sa jedne osobe na drugu ili sa jednoga mesta na telu na drugo putem direktnog kontakta sa zaraženim područjem. Bradavice se često razvijaju na prstima ili na dlanu, na kolenima i laktovima. Prepoznate ih po grubom izgledu na površini (poput karfiola).

Bradavice na stopalima javljaju se samo na tabanima ili pod prstima nogu. Obično su bolne i izgledaju poput belog prstena na koži, sa crnim tačkama u sredini. Te bradavice su takođe zarazne i mogu se preneti na drugu osobu kontaktom sa mokrom površinom, npr. podom.

Obične bradavice i bradavice na stopalima tradicionalno se uklanjaju na dva načina. Prvi način je pomoću kiselih tečnosti kao što je Wortie® Liquid koje deluju tako da razgrađuju bradavicu. Drugi način uključuje fizičko uklanjanje bradavice laserom ili zamrzavanjem.

C. Zašto je Wortie® Liquid drugačiji?

Wortie® Liquid je zasnovan na osnovu naučnih dostignuća i ima jedinstvenu kombinaciju sastojaka koji omogućuju da njegova formulacija bude manje agresivna za efikasno uklanjanje bradavica. Ta formulacija na koži se brzo suši i ne ostavlja mrlje, a veoma precizan aplikator sprečava oštećenje zdrave okolne kože. Posle nanošenja tečnosti proziran flaster prekriva bradavicu i omogućuje da tečnost ostane na mestu i istovremeno zaštiti bradavicu.

D. Kako deluje Wortie® Liquid?

Tehnologija GTA (tehnologija glikolne kiseline + trihlorsirćetne kiseline + alkohola):

Ta tehnologija je jedinstvena za Wortie® Liquid i zasnovana na najnovijim naučnim dostignućima o bradavicama. To je inovacija koju je razvila grupa zdravstvenih stručnjaka i omogućuje veoma brzu upotrebu.

- **Efikasna i sigurnija smeša sastojaka**
Formulacija medicinskog sredstva Wortie® Liquid zasnovana je na smeši dobro poznatih kiselina koje se upotrebljavaju za uklanjanje bradavica. Kombinacija tih sastojaka omogućuje formulaciji medicinskog sredstva da bude manje agresivna pri efikasnom uklanjanju bradavica.

Formulacija medicinskog sredstva Wortie® Liquid ima duplo dejstvo:

- Ljušti gornje slojeve koji čine zadebljani deo bradavice. To omekšava tvrdi kožu i tako omogućuje odstranjivanje bradavice (aktivna supstanca: glikolna kiselina).
- Duboko ljuštenje tkiva koje čini bradavicu (aktivna supstanca: trihlorsirćetna kiselina).

- Medicinski proizvod ne smijete progutati. Sadržaj je otrovan i može izazvati ozbiljna unutarnja oštećenja. Ako ga progutate, potražite liječničku pomoć ili nazovite Centar za kontrolu otrovanja.
- Samo za vanjsku primjenu. Ako ne budete upotrebljavali medicinski proizvod sukladno uputi ili ga nehotice nanosite neposredno na kožu ili kožnu promjenu koja nije bradavica, to može prouzročiti draženje i ožiljke na koži.
- Čuvajte izvan dohvata djece. Djeca ne razumiju upute kako pravilno upotrebljavati proizvod. Proizvod je opasan ako se proguta ili upotrijebi na drugim dijelovima tijela osim na bradavicama.
- Opasnost od gušenja i sitni dijelovi.
- Zapaljivo. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Čuvajte na suhom mjestu, na sobnoj temperaturi, odvojeno od izvora topline.

H. Mjere opreza

- Glikolna kiselina i triklorooctena kiselina su korozivne kiseline. Medicinski proizvod nanosite samo na bradavicu i izbjegavajte zdravu okolnu kožu.
- Nakon nanošenja izbjegavajte izlaganje tretiranog područja UV svjetlosti ili neposrednoj sunčevoj svjetlosti da izbjegnate draženje ili hiperpigmentaciju. Upotreba flastera pomaže vam u zaštiti od neposredne sunčeve svjetlosti.
- Wortie® Liquid može oštetiti vašu imovinu ako dođe u dodir s odjećom, nakitom, pokućstvom ili podom.
- Ako osjetite upalu ili jake bolove i crvenilo nakon aplikacije, prekinite upotrebu proizvoda, oprezno operite područje vodom i sapunom da uklonite proizvod s kože i posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

E. Brz i precizan

Wortie® Liquid se suši za približno 30 sekundi i tako pomaže u sprečavanju nastanka oštećenja i iritacija. Precizan aplikator sprečava oštećenje zdrave okolne kože.

- **Prozirni flasteri za zaštitu**

Wortie® Liquid sadrži flastere za zaštitu područja posle aplikacije medicinskog sredstva. Flasteri omogućuju dužu izloženost aktivnim supstancama. Pored toga deluju kao zaštitni sloj koji održava područje čistim, štiti od dodira, prekriva bradavicu da izbegnete nelagodu i smanjuje mogućnost prenosa virusa bradavice na druge osobe.

F. Kako se upotrebljava Wortie® Liquid?

Područje operite toplom vodom i sapunom. Pre nanošenja sredstva koža mora da bude suva.

1
Bočicu čvrsto postavite na ravnu površinu i odvojite čep.

2
Pažljivo izvucite aplikator iz bočice.

3
Nanesite tečnost na bradavicu i ostavite da se suši približno 30 sekundi.

4
Preko bradavice nalepite prozirni flaster (ostavite ga najmanje 4 sata).

30 sek.

- Uz pomoć aplikatora Wortie® Liquid precizno nanesite tanak sloj tečnosti na bradavicu. Pazite da tečnost ne naneseite na okolnu zdravu kožu. Ako se to ipak dogodi, obrišite suvišnu tečnost maramicom ili operite područje vodom i sapunom ako bude potrebno. Zatim pažljivo ponovo nanesite medicinski sredstvo.
- Pričekajte da se tečnost osuši (približno 30 sekundi).
- Kad područje aplikacije bude sasvim suvo, na bradavicu nalepite flaster.
- Ostavite flaster najmanje 4 sata ili dok sam ne otpadne. Ako je flaster posle 24 sata još uvek na bradavici, oprezno ga skinite i operite područje toplom vodom i sapunom.
- Medicinsko sredstvo nanosite dvaput nedeljno kako je gore opisano dok bradavica ne nestane.

Vreme do nestanka bradavice umnogome zavisi od veličine bradavice. Neke bradavice nestaju posle nedelju dana upotrebe medicinskog sredstva, a za veće bradavice treba više vremena, do 8 nedelja.

Važno je da se tačno pridržavate uputstva za upotrebu ovog medicinskog sredstva. Nepravilna upotreba može da izazove osećaj pečenja ili iritacije zdrave kože i prouzrokovati trajno oštećenje gornjeg sloja kože.

G. Upozorenja

- Upotrebljavajte samo u skladu sa uputstvom za upotrebu.
- Tečnost nanesite samo na bradavicu.
- Posebno pazite da medicinsko sredstvo ne nanosite na okolnu zdravu kožu.
- Ne nanosite na područja sa tankom ili osetljivom kožom poput lica, pazuha, grudi, stražnjice ili na

- Ako primijetite da crvenilo ili draženje ostaju nakon jednog ili više nanosa, prekinite upotrebu proizvoda i posavjetujte se s liječnikom.
- Ako naneseite previše tekućine, moguća je nadraženost kože.
- Posebno pazite kad proizvod nanosite na suhu kožu.
- Wortie® Liquid mora djetetu (4+) nanijeti odrasla osoba.
- Posavjetujte se s liječnikom ako nakon 3 mjeseca redovite upotrebe ne primijetite poboljšanje.
- Proizvod smije upotrebljavati samo jedna osoba jer se time održava optimalna osobna higijena.

I. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi odstranjivači bradavica i Wortie® može imati nuspojave iako se ne javljaju kod svih korisnika:

- Tijekom djelovanja tekućine možete osjetiti lagano probadanje ili peckanje i/ili blagu osjetljivost tretiranog područja. To je obično prolazno; rijetko se na koži mogu pojaviti mrlje (tamna ili crvena koža).
- Ako se ti učinci pogoršaju ili primijetite neočekivanu nelagodu, prekinite upotrebu proizvoda i odmah obavijestite liječnika ili ljekarnika.
- Zaštitite tretirano područje od neposredne UV svjetlosti i sunca da biste izbjegli draženje ili hiperpigmentaciju. Upotreba flastera pomoći će vam zaštititi područje od neposredne sunčeve svjetlosti.

J. Nastavak liječenja

- Tretirano područje držite čistim.
- Za vrijeme upotrebe medicinskog proizvoda možete plovati ili se tuširati.
- Ne čekajte tretirano područje jer je moguća infekcija.

genitalno područje. Upotreba na tim područjima može da izazove iritaciju i/ili ožiljke.

- Ne upotrebljavajte medicinsko sredstvo ako bradavicu ne vidite jasno ili neka vam neko pomogne u nanošenju.
- Ne upotrebljavajte medicinsko sredstvo ako ste preosjetljivi na bilo koji njegov sastojak.
- Ne upotrebljavajte kod dece mlađe od 4 godine.
- Ne upotrebljavajte na iritiranu kožu ili na bilo koje područje koje je inficirano, pocrvenelo ili pokazuje znakove zapaljenja poput svraba ili oticanja. Pri mena Wortie® Liquid na ova područja može da izazove pogoršanje stanja kože. U ovom slučaju se možda ne radi o bradavici i ovu promenu treba da pregleda lekar.
- Ako medicinsko sredstvo nanosite na kožnu promenu koju nije bradavica, trajanje lečenja može da se produži. Stanje vaše kože se može ozbiljno pogoršati ili dovesti do bolesti.
- Ne upotrebljavajte na duguljastim kožnim izraslinama (fibromima), pjegama, mladežima, bradavicama iz kojih rastu dlake, genitalnim bradavicama (na penisu ili vaginalnom području) ili na bradavicama na licu ili sluzokoži (npr. u ustima, nosu, anusu, genitalijama, usnama, ušima ili blizu očiju). Upotreba na ovim područjima može da izazove opekotine ili trajne ožiljke na koži, odnosno može da prouzrokuje slepilo ako uđe u oči.
- Flastere ne smete ponovo da upotrebljavate.
- Medicinsko sredstvo ne smete da upotrebljavate ako ne vidite jasno informacije na bočici i u uputstvu za upotrebu.
- Ne nanosite medicinsko sredstvo zajedno sa drugim metodama uklanjanja bradavica jer nije jasno kako će kombinacija uticati na vašu kožu.
- Medicinsko sredstvo ne smete da upotrebljavate ako ste trudni, dojite, imate šećernu bolest ili lošu cirkulaciju.
- Izbjegavajte kontakt sa očima. Ako ste medicinsko sredstvo naneli na ruke, nemojte njima trljati ili dirati oči. Pri kontaktu sa očima ispirajte oči vodom 15 minuta i odmah potražite lekarsku pomoć.
- Medicinsko sredstvo ne smete da progutate. Sadržaj je otrovan i može da izazove ozbiljna unutarašnja oštećenja. Ako ga progutate, potražite ili nazovite hitnu lekarsku pomoć.
- Samo za spoljašnju primenu. Ako ne budete upotrebljavali medicinsko sredstvo u skladu sa uputstvom ili ga slučajno naneseite direktno na kožu ili kožnu promenu koja nije bradavica, to može da prouzrokuje iritaciju i ožiljke na koži.
- Čuvajte van domašaja dece. Deca ne razumeju uputstva kako pravilno upotrebljavati proizvod. Proizvod je opasan ako se proguta ili upotrebi na drugim delovima tela osim na bradavicama.
- Opasnost od davljenja – sitni delovi.
- Zapaljivo. Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Čuvajte na suvom mestu, na sobnoj temperaturi, odvojeno od izvora toplote.

- Izbjegavajte kontakt sa očima. Ako ste medicinsko sredstvo naneli na ruke, nemojte njima trljati ili dirati oči. Pri kontaktu sa očima ispirajte oči vodom 15 minuta i odmah potražite lekarsku pomoć.
- Medicinsko sredstvo ne smete da progutate. Sadržaj je otrovan i može da izazove ozbiljna unutarašnja oštećenja. Ako ga progutate, potražite ili nazovite hitnu lekarsku pomoć.
- Samo za spoljašnju primenu. Ako ne budete upotrebljavali medicinsko sredstvo u skladu sa uputstvom ili ga slučajno naneseite direktno na kožu ili kožnu promenu koja nije bradavica, to može da prouzrokuje iritaciju i ožiljke na koži.
- Čuvajte van domašaja dece. Deca ne razumeju uputstva kako pravilno upotrebljavati proizvod. Proizvod je opasan ako se proguta ili upotrebi na drugim delovima tela osim na bradavicama.
- Opasnost od davljenja – sitni delovi.
- Zapaljivo. Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Čuvajte na suvom mestu, na sobnoj temperaturi, odvojeno od izvora toplote.

H. Mere opreza

- Glikolna kiselina i trihlorsirćetna kiselina su jake kiseline. Medicinsko sredstvo nanosite samo na bradavicu i izbjegavajte okolnu zdravu kožu.
- Posle nanošenja izbjegavajte izlaganje tretiranog područja UV svetlosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti da izbegnete iritaciju ili hiperpigmentaciju. Upotreba flastera pomaže vam u zaštiti od direktne sunčeve svetlosti.
- Wortie® Liquid može oštetiti vašu imovinu ako dođe u dodir sa odećom, nakitom, nameštajem ili podom.
- Ako osетite upalu ili jake bolove i crvenilo posle aplikacije, prekinite upotrebu sredstva, oprezno operite područje vodom i sapunom da odstranite sredstvo sa kože i posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

- Izbjegavajte sunce.

Sadržaj pakiranja Wortie® Liquid

- Bočica s 5 ml tekućine. Količina tekućine dovoljna je za 18 aplikacija, odnosno za sve vrijeme tretiranja.
- 18 bezbojnih flastera za jednokratnu upotrebu za prekrivanje i zaštitu bradavice nakon nanošenja tekućine.

Ova uputa za upotrebu sadrži informacije o djelovanju medicinskog proizvoda te upozorenja i ograničenja pri upotrebi.

Sastojci: denaturirani alkohol, glikolna kiselina, trikloroctena kiselina

€ 0481

Datum revizije upute: srpanj 2018.

Proizvod možete upotrebljavati do isteka roka upotrebe označenog na kutiji.

Proizvođač :
YouMedical BV,
Barbara Strozziilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nizozemska

Kontakt za RH: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, 10000 Zagreb
Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeda Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

- Ako primetite da crvenilo ili iritacija ostaju posle jednog ili više nanosa, prekinite upotrebu sredstva i posavetujte se sa lekarom.
- Ako naneseite previše tečnosti, moguća je iritacija kože.
- Posebno pazite kada sredstvo nanosite na suhu kožu.
- Wortie® Liquid detetu (4+) mora naneti odrasla osoba.
- Posavetujte se sa lekarom ako posle 3 meseca redovne upotrebe ne primetite poboljšanje.
- Sredstvo sme upotrebljavati samo jedna osoba jer se time održava optimalna lična higijena.

I. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi odstranjivači bradavica i Wortie® može imati neželjena dejstva iako se ne javljaju kod svih korisnika:

- Tokom delovanja tečnosti možete osетiti lagano probadanje ili peckanje i/ili blagu osетljivost tretiranog područja. To je obično prolazno; retko se na koži mogu pojaviti mrlje (tamna ili crvena koža).
- Ako se ti efekti pogoršaju ili primetite neočekivanu nelagodu, prekinite upotrebu sredstva i odmah obavestite lekara ili farmaceuta.
- Zaštitite tretirano područje od direktne UV svetlosti i sunca da biste izbegli iritaciju ili hiperpigmentaciju. Upotreba flastera pomoći će vam da zaštitite područje od direktne sunčeve svetlosti.

J. Nastavak lečenja

- Tretirano područje držite čistim.
- Za vreme upotrebe medicinskog sredstva možete da plovate ili da se tuširate.
- Nemojte češati tretirano područje jer ovo može dovesti do infekcije.
- Izbegavajte sunce.

Sadržaj pakovanja Wortie® Liquid

- Bočica sa 5 ml tečnosti. Količina tečnosti dovoljna je za 18 aplikacija, odnosno za sve vreme tretiranja.
- 18 bezbojnih flastera za jednokratnu upotrebu za prekrivanje i zaštitu bradavice posle nanošenja tečnosti.

Ovo uputstvo za upotrebu sadrži informacije o delovanju medicinskog sredstva, kao i upozorenja i ograničenja pri upotrebi.

Sastojci: denaturisani alkohol, glikolna kiselina, trihlorsirćetna kiselina

€ 0481

Datum revizije uputstva: jul 2018.

Sredstvo možete da upotrebljavate do isteka roka upotrebe, koji je označen na kutiji.

Proizvođač:
YouMedical BV, Barbara Strozziilaan 201,
1083 HN Amsterdam, Holandija

Nosilac upisa u registar u RS:
Medis .Pharma .d.o.o., Milutinica .11b
11070 Beograd – Novi Beograd, Srbija

Broj i datum upisa u registar medicinskih sredstava:

Distributeri u RS:
PHOENIX PHARMA d.o.o., Beograd, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; VEGA d.o.o. Valjevo, Vuka Karadžića 41, 14000 Valjevo; FARMALOGIST d.o.o., Mirijevski Bulevar 3, 11000 Beograd